



ÇÜNKÜ SADECE İKİ GÖZÜNÜZ VAR



PLUM PH NEUTRAL 4752

ASİT ALKALİ GÖZ VE CİLT NÖTRALİZASYONU BİLGİ FÖYÜ





Plum pH Neutral - Ürün Bilgisi



Ürün


pH Neutral, Asit ya da alkali maddelerden kaynaklı göz ve cilt kazalarına karşı 2 dakikalık ilk yardım duşudur. Şişeler, sıvıyı eşit ve yavaş akımak için ergonomik göz kupa ile donatılmıştır. Durulama sırasında şişeyi hafifçe sıkın. DUO şişeleri aynı anda her iki gözün durulanmasını sağlayan özel bir göz kupa ile donatılmıştır. Plum göz yıkama şişeleri 93/42/EEC AB direktifine göre üretilmiştir. Bir güvenlik bilgi formu mevcuttur.



Uygulama Yerleri

% 4.9 fosfat tampon içeren bu solüsyonun kullanım amacı kimyasalın pH seviyesini en hızlı şekilde zararsız inmesi için nötralize etmektir. Normal su veya % 0.9 sodyum klorür solüsyonu kullanarak sadece bir seyreltme ve durulama etkisi (aşağıdaki şekil 1'e bakınız) sağlarsınız. pH Neutral etkinliği üzerine yapılan çalışmaları görmek isterseniz bizimle iletişime geçiniz. pH Neutral kullandıktan sonra bir doktora ulaşana kadar gözünüzü Plum Göz Duşu % 0.9 sodyum klorür ile yıkamaya devam etmenizi öneririz. Not: Tüm göz yaralanmaları için tıbbi yardım alın!

Şekil 1: * pH Neutral ve % 0.9 sodyum klorid solüsyonların nötralize etkisi

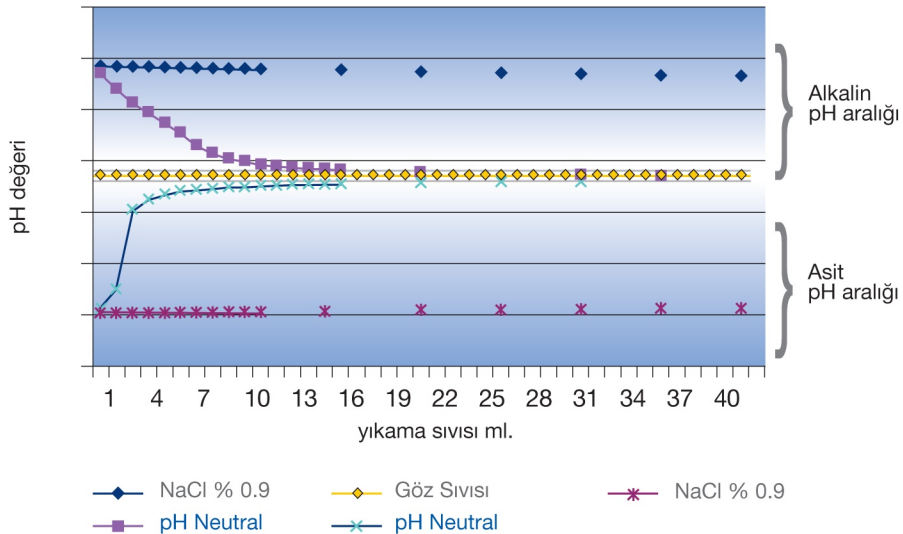

*Plum A/S tarafından (in vitro), laboratuvarında yapılan bir titrasyon testi. Test; 1 damla sülfirik asit + 40 Ml. su ve ardından 1 damla potasyum hidroksit + 40 Ml. su içeren solüsyona aşamalı olarak pH Neutral ve % 0.9 sodyum klorid eklenerek yapılmıştır. Kullanılan solüsyon miktarı ve değişen pH değeri ölçülmüştür.



Size faydaları

- Yüksek fonksiyonel güvenilirlik - şişeler EN 15154-4 göre üretilmektedir
- Esnek çözümler – Mobil kullanım ve duvara asılan istasyonlar için farklı boyutlarda göz duşu şişeleri
- Geniş kullanım alanı (örneğin sanayi, laboratuvarlar, ilk yardım çantaları, kamyonet mobil kullanım, cepler vb.)
- Kullanımı kolay – yaralı kişi başkasından yardım almadan göz duşunu kullanıp kendi gözlerini temizleyebilir
- Kapak mühürü açılmamış şişeler için 3 yıllık uzun raf ömrü
- Göz duşları bakım ya da solisyonun değiştirilmesini gerektirmez (normal su gibi)

Şişe nasıl kullanılır:



Istasyonundan şişeyi kaldır



Kapak mühürü kırılana kadar kapağı çevirin



Başınızı geriye atın ve gözlerinizi durulayın



Islak kıyafetlerinizin ıslanmasını önlemek için başınızı öne eğin, şişeyi sıkın ve gözlerinizi durulayın

Kullanım talimatları

Ürün tek kullanım içindir. Son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız (etikete bakınız). Doğru göz durulmasını sağlamak için, şişe kapak mührünün bozulmamış olması gerekmektedir. Daha önce şişe kapak mühürü açılıp kullanılan göz duşu, tekrar kullanıldığında enfeksiyona sebep olabilir.

Şişe boyutları

İçerik	200 ml	500 ml Duo	1000 ml Acil Vücut duş
Ürün Kodu	4752	4801	4746
Durulama Zamanı	Yaklaşık 2 dakika	Her göz için yaklaşık 2 dakika	Yaklaşık 2 dakika
Boyutlar	165 B x 55 G mm	220 B x 75 G mm	270 B x 85 G mm



**Çağlayan Kağıthane Cad. Dilruba Çıkması (Yener Çıkması) Sk.
No:7/A Çağlayan Kağıthane İstanbul**



**0212 222 65 15
0212 222 65 16**



www.gozdusu.net