



**ÇÜNKÜ SADECE İKİ GÖZÜNÜZ VAR**



**PLUM PH NEUTRAL TEKLİ İSTASYON 4610  
ASİT ALKALİ GÖZ VE CİLT NÖTRALİZASYONU BİLGİ FÖYÜ**





**INS**



## PLUM 4610 TEKLİ GÖZ DUŞU İSTASYONU

- Tek şişeli duvara monte göz duşu istasyonudur (Plum Ph Neutral kimyasal yanmayı durdurur)
  - Duvara montajlı bu göz duşu istasyonu 1 adet 200 ml kimyasal asit ve alkali sıçramalarına karşı nötrale özelliği olan plum ph neutral göz duşu içerir
  - Tekli göz duşu istasyonları özellikle yaralanma riski bulunan küçük işletmeler için idealdir
  - Göz duşu istasyonu üzerindeki şişe işletme içinde mobil olarak taşınabilir
  - Göz duşu istasyonu üzerinde ürünün nasıl kullanılacağını şekiller ile anlatan levhası ürünün yanına monte edilmiştir
  - Göz duşu istasyonu montajı için kutusunun içinden iki adet vida ve dübel çıkacaktır
  - Göz duşu istasyonunda bulunan 4752 ph nötr Göze asit, alkali, kostik kaçması sonucu oluşan kimyasal göz yaralanmalarında 1-17 sn gibi bir sürede gözün ph derecesini, gözün gündelik ph derecesi olan 7,4 e sabitlet ve göz nötralizasyonu sağlayarak korneanın yanmasını engeller ve göz ilkyardımlı sağlar
  - % 4.9 fosfat tampon içeren bu solüsyonun kullanım amacı göz veya ciltteki kimyasalın pH seviyesini en hızlı şekilde zararsız hale getirmek için nötrale etmektir. Normal su veya % 0.9 sodyum klorür solüsyonu kullanarak sadece bir seyreltme ve durulama etkisi sağlarsınız.
  - Yüksek fonksiyonel güvenilirlik - Plum göz duşu şişeleri EN 15154-4 göre üretilmektedir
  - Kullanımı kolay – yaralı kişi başkasından yardım almadan göz duşunu kullanıp kendi gözlerini temizleyebilir
  - pH Neutral, Asit ya da alkali maddelerden kaynaklı göz ve cilt kazalarına karşı 2 dakikalık ilk yardım duşudur. Şişeler, sıvıyı eşit ve yavaş akıtmak için ergonomik göz kupa ile donatılmıştır.
  - Plum 4752 ph neutral göz duşu %4.9 Fosfat tamponu içerir ve izotonik çözeltilere göre, göze daha hızlı nüfus ettiği ispatlanmıştır.
  - 200 ml küçük şişesi ile bu göz duşunu yanınızda kolaylıkla taşıyabilirsiniz; ister bel çantanıza koyun isterseniz ilk yardım çantanıza veya alet çantanıza vb
  - Göz duşu, üzerine montajlı ergonomik göz yıkama kapağı ile birlikte 3 yıl muhafaza edilebilir.
- plum ph neutral göz duşu solüsyonu kesinlikle kalsiyum maddeleri içeren örneğin kireç, çimento vb. maddeler ile kullanılmamalıdır



## Plum pH Neutral - Ürün Bilgisi

### Ürün


pH Neutral, Asit ya da alkali maddelerden kaynaklı göz ve cilt kazalarına karşı 2 dakikalık ilk yardım duşudur. Şişeler, sıvıyı eşit ve yavaş akımak için ergonomik göz kupa ile donatılmıştır. Durulama sırasında şişeyi hafifçe sıkın. DUO şişeleri aynı anda her iki gözün durulanmasını sağlayan özel bir göz kupa ile donatılmıştır. Plum göz yıkama şişeleri 93/42/EEC AB direktifine göre üretilmiştir. Bir güvenlik bilgi formu mevcuttur.



### Uygulama Yerleri

% 4.9 fosfat tampon içeren bu solüsyonun kullanım amacı kimyasalın pH seviyesini en hızlı şekilde zararsız inmesi için nötralize etmektir. Normal su veya % 0.9 sodyum klorür solüsyonu kullanarak sadece bir seyreltme ve durulama etkisi (aşağıdaki şekil 1'e bakınız) sağlarsınız. pH Neutral etkinliği üzerine yapılan çalışmaları görmek isterseniz bizimle iletişime geçiniz. pH Neutral kullandıktan sonra bir doktora ulaşana kadar gözünüzü Plum Göz Duşu % 0.9 sodyum klorür ile yıkamaya devam etmenizi öneririz. Not: Tüm göz yaralanmaları için tıbbi yardım alın!

Şekil 1: \* pH Neutral ve % 0.9 sodyum klorid solüsyonların nötralize etkisi

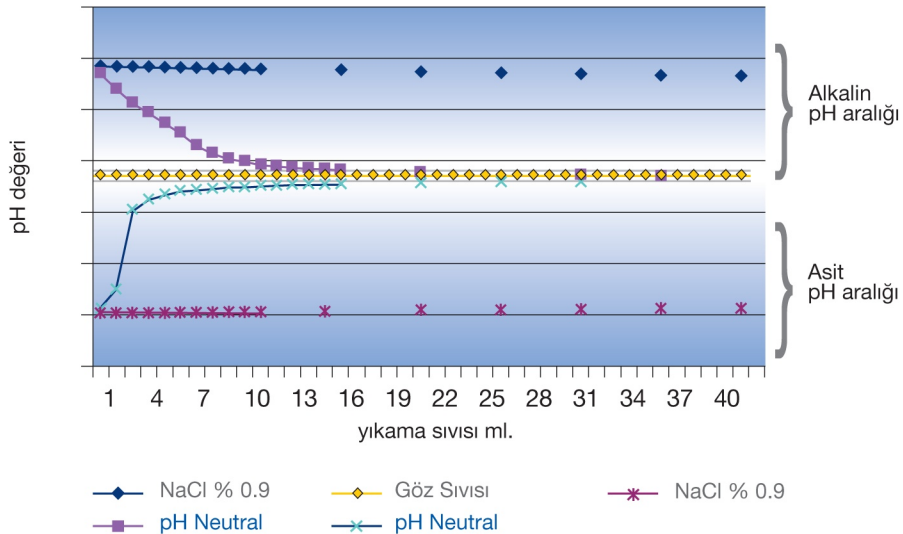

\*Plum A/S tarafından (in vitro), laboratuvarında yapılan bir titrasyon testi. Test; 1 damla sülfirik asit + 40 Ml. su ve ardından 1 damla potasyum hidroksit + 40 Ml. su içeren solüsyona aşamalı olarak pH Neutral ve % 0.9 sodyum klorid eklenerek yapılmıştır. Kullanılan solüsyon miktarı ve değişen pH değeri ölçülmüştür.



## Size faydaları

- Yüksek fonksiyonel güvenilirlik - şişeler EN 15154-4 göre üretilmektedir
- Esnek çözümler – Mobil kullanım ve duvara asılan istasyonlar için farklı boyutlarda göz duşu şişeleri
- Geniş kullanım alanı (örneğin sanayi, laboratuvarlar, ilk yardım çantaları, kamyonet mobil kullanım, cepler vb.)
- Kullanımı kolay – yaralı kişi başkasından yardım almadan göz duşunu kullanıp kendi gözlerini temizleyebilir
- Kapak mühürü açılmamış şişeler için 3 yıllık uzun raf ömrü
- Göz duşları bakım ya da solisyonun değiştirilmesini gerektirmez (normal su gibi)

## Şişe nasıl kullanılır:



Istasyonundan şişeyi kaldır



Kapak mühürü kırılana kadar kapağı çevirin



Başınızı geriye atın ve gözlerinizi durulayın



Islak kıyafetlerinizin ıslanmasını önlemek için başınızı öne eğin, şişeyi sıkın ve gözlerinizi durulayın

## Kullanım talimatları

Ürün tek kullanım içindir. Son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız (etikete bakınız). Doğru göz durulmasını sağlamak için, şişe kapak mührünün bozulmamış olması gerekmektedir. Daha önce şişe kapak mühürü açılıp kullanılan göz duşu, tekrar kullanıldığında enfeksiyona sebep olabilir.

## Şişe boyutları

İçerik	200 ml	500 ml Duo	1000 ml Acil Vücut duş
Ürün Kodu	4752	4801	4746
Durulama Zamanı	Yaklaşık 2 dakika	Her göz için yaklaşık 2 dakika	Yaklaşık 2 dakika
Boyutlar	165 B x 55 G mm	220 B x 75 G mm	270 B x 85 G mm



**Çağlayan Kağıthane Cad. Dilruba Çıkması (Yener Çıkması) Sk.  
No:7/A Çağlayan Kağıthane İstanbul**



**0212 222 65 15  
0212 222 65 16**



**[www.gozdusu.net](http://www.gozdusu.net)**